


GONATO

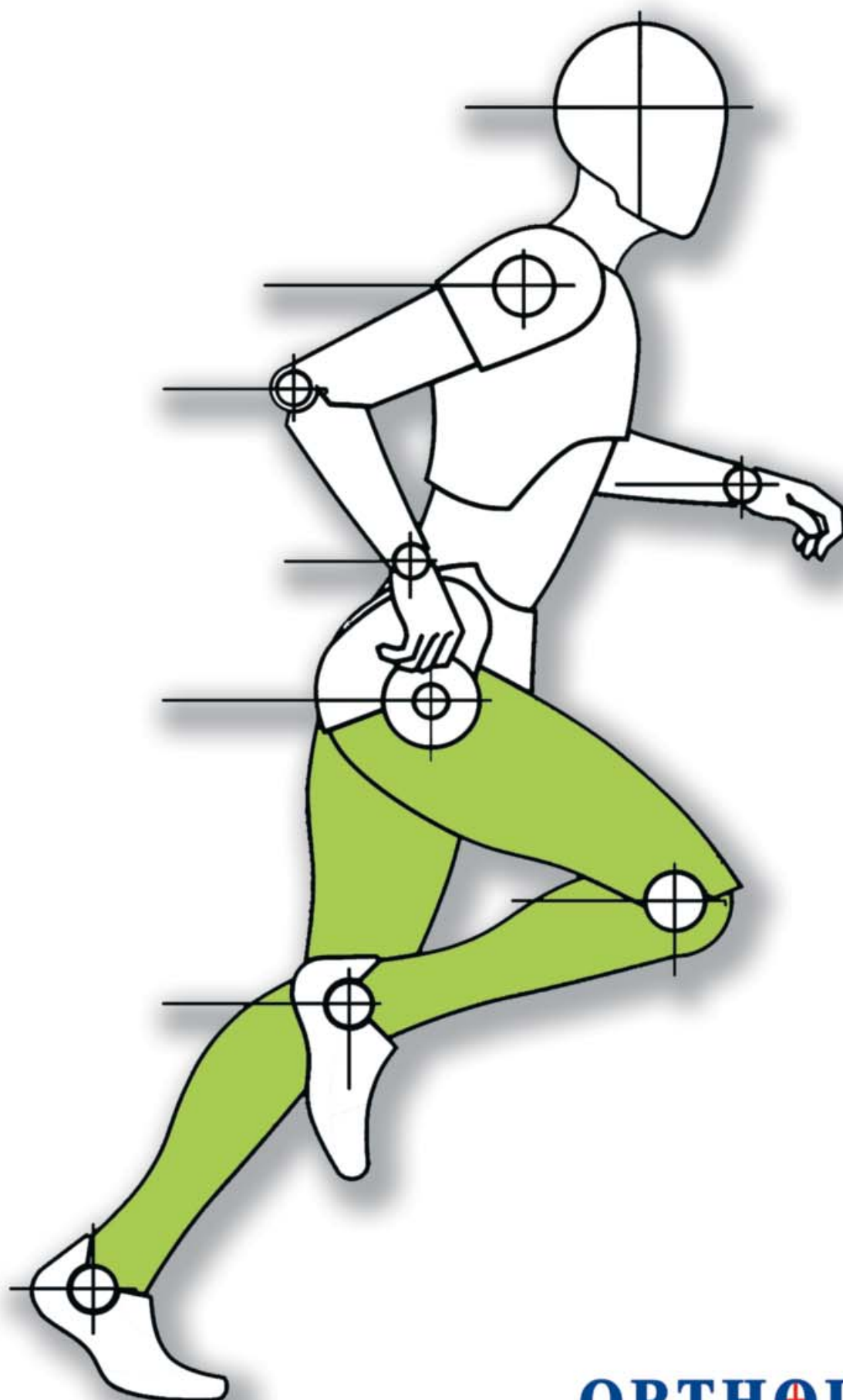

ORTHOLAND

ΑΓΙΟ ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟ STRAP "KNEEPAD"

Κωδικός	80300
Μέγεθος	Κοινό
Χρώμα	Μπεζ

- Κατασκευή από κατεργασμένο μαλακό δέρμα υψηλής ποιότητας και αντοχής με επικάλυψη από βαμβάκερο ύφασμα.
- Εφαρμογή με μεταλλικό μηχανισμό και αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Μπορεί να πλυθεί.
- Αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά, αεριζόμενα, μη τοξικά υλικά.

Ενδείξεις: Ιδανικό για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Τενοντίτις Υποεπιγονατιδικού Τένοντα "JUMPER'S KNEE".
Οστεοχονδρίτιδα Κνημιαίου Κυρτώματος "OSGOOD-SCHLATTER".

ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟ STRAP ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ

Κωδικός	GI / 5004
Μέγεθος	Κοινό
Περιφ. Υποεπιγονατίδος σε εκ.	30/45
Χρώμα	Μαύρο

- Κατασκευή από πολυουρεθάνη, υψηλής ποιότητας και αντοχής, αντιαλλεργική, αεριζόμενη, αντιεφιδρωτική, μη τοξική.
- Εσωτερικό "μαξιλάρι" από βαμβάκι και πολυαμίδη.
- Εφαρμογή με μονό πλαστικό μηχανισμό και αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικό για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Τενοντίτις Υποεπιγονατιδικού Τένοντα "JUMPER'S KNEE".
Οστεοχονδρίτιδα Κνημιαίου Κυρτώματος "OSGOOD-SCHLATTER".

ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟ STRAP ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Κωδικός	80300 W/SILICONE
Μέγεθος	Κοινό
Χρώμα	Μαύρο

- Κατασκευή από ύφασμα τριπλής περιέλιξης τύπου "MICROKLIMA" υψηλής ποιότητας και αντοχής, αντιαλλεργικό, αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό, μη τοξικό.
- Διαθέτει εσωτερικά επίθεμα σιλικόνης προσθαφαιρούμενο με αυτοκόλλητο.
- Εφαρμογή με πλαστικό μηχανισμό και αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικό για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Τενοντίτις Υποεπιγονατιδικού Τένοντα "JUMPER'S KNEE".
Οστεοχονδρίτιδα Κνημιαίου Κυρτώματος "OSGOOD-SCHLATTER".





ΑΠΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ "PREMIUM"

Κωδικός	PREMIUM ELASTIC KNEE	
Μέγεθος	S/M	L/XL
Περιφ. Γόνατος σε εκ.	28/35	35/42
Μήκος σε εκ.	24	24
Χρώμα	Λευκό	

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα διπλής περιέλιξης υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Ειδική πλέξη αντιαλλεργική, αεριζόμενη, αντιεφιδρωτική.
- Προκαλεί βαθμιαία συμπίεση στα μαλακά μέρη, ιστούς αυξάνοντας την αιματική ροή.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος (ΟΑ) - Εκφυλιστικές Παθήσεις Γόνατος, Παθήσεις, Κακώσεις Συνδέσμων και Τενόντων Γόνατος.

New



ΑΠΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ "PREMIUM"

Κωδικός	INT / 012 - 014		
Μέγεθος	S	M	L
Περιφ. Γόνατος σε εκ.	25/32	32/39	39/45
Μήκος σε εκ.	24	24	24
Χρώμα	Μαύρο		

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα 35%, νάυλον 52%, ελαστικές ίνες SPANDEX 13%.
- Ειδική πλέξη αντιαλλεργική, αεριζόμενη, αντιεφιδρωτική.
- Προκαλεί βαθμιαία συμπίεση στα μαλακά μέρη και στους ιστούς αυξάνοντας την αιματική ροή.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος (ΟΑ) - Εκφυλιστικές Παθήσεις Γόνατος, Παθήσεις, Κακώσεις Συνδέσμων και Τενόντων Γόνατος.



ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ FOAM

Κωδικός	8245
Μέγεθος	Κοινό
Μήκος σε εκ.	30
Χρώμα	Μαύρο

- Κατασκευασμένο από FOAM αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό, μη τοξικό.
- Διαθέτει την δυνατότητα πρόσβασης στην Επιγονατίδα.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες με αυτοκόλλητο κλείσιμο.
- Αντικαθιστά όλες τις μεθόδους επίδεσης.
- Βοηθά Μετεγχειρητικά στην απορρόφηση του Οιδήματος, Αιμάθρου και Φλεγμονών.
- Περιορίζει τη φλεγμονή του Αρθρικού Υμένα
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για άμεση Μετεγχειρητική χρήση στο Γόνατο.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΟΠΗ "PATELLA MED LITE"

Κωδικός	46 / 713 OPEN					
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
Μήκος σε εκ.	26	26	26	26	26	26
Χρώμα	Καφέ					

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα με Ειδική πλέξη δύο στρωμάτων **(2-D)** αντιολισθητικού τύπου **"KNITTED"**, με αντιαλλεργική, αεριζόμενη δράση.
- Ειδική πλέξη δύο στρωμάτων **(2-D)** από αεριζόμενες ίνες με αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική, μη τοξική δράση υψηλής αντοχής.
- Προκαλεί βαθμιαία συμπίεση στα μαλακά μέρη, αυξάνοντας την αιματική ροή.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος (**ΟΑ**) - Εκφυλιστικές Παθήσεις Γόνατος.
Παθήσεις, Κακώσεις Συνδέσμων και Τενόντων Γόνατος.



ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ "PATELLA MED LITE"

Κωδικός	46 / 713 CLOSED					
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
Μήκος σε εκ.	26	26	26	26	26	26
Χρώμα	Καφέ					

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα με Ειδική πλέξη δύο στρωμάτων **(2-D)** αντιολισθητικού τύπου **"KNITTED"**, με αντιαλλεργική, αεριζόμενη δράση.
- Ειδική πλέξη δύο στρωμάτων **(2-D)** από αεριζόμενες ίνες με αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική, μη τοξική δράση υψηλής αντοχής.
- Προκαλεί βαθμιαία συμπίεση στα μαλακά μέρη, αυξάνοντας την αιματική ροή.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος (**ΟΑ**) - Εκφυλιστικές Παθήσεις Γόνατος.
Παθήσεις, Κακώσεις Συνδέσμων και Τενόντων Γόνατος.




ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "PATELLA MED LITE"

Κωδικός	46 / 711 OPEN				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56
Μήκος σε εκ.	26	26	26	26	26
Χρώμα	Καφέ				

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα με ειδική πλέξη δύο στρωμάτων **(2-D)** αντιολισθητικού τύπου **"KNITTED"**, με αντιαλλεργική, αεριζόμενη δράση.
- Ειδική πλέξη δύο στρωμάτων **(2-D)** από αεριζόμενες ίνες με αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική, μη τοξική δράση υψηλής αντοχής.
- Προκαλεί βαθμιαία συμπίεση στα μαλακά μόρια, αυξάνοντας την αιματική ροή.
- Διαθέτει τέσσερις εύκαμπτες πλάγιες μπανέλες.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος (**ΟΑ**) - Εκφυλιστικές Παθήσεις Γόνατος. Παθήσεις, Κακώσεις Συνδέσμων και Τενόντων Γόνατος.


ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "PATELLA MED LITE"

Κωδικός	46 / 711 CLOSED				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56
Μήκος σε εκ.	26	26	26	26	26
Χρώμα	Καφέ				

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα με ειδική πλέξη δύο στρωμάτων **(2-D)** αντιολισθητικού τύπου **"KNITTED"**, με αντιαλλεργική, αεριζόμενη δράση.
- Ειδική πλέξη δύο στρωμάτων **(2-D)** από αεριζόμενες ίνες με αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική, μη τοξική δράση υψηλής αντοχής.
- Προκαλεί βαθμιαία συμπίεση στα μαλακά μόρια, αυξάνοντας την αιματική ροή.
- Διαθέτει τέσσερις εύκαμπτες πλάγιες μπανέλες.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος (**ΟΑ**) - Εκφυλιστικές Παθήσεις Γόνατος. Παθήσεις, Κακώσεις Συνδέσμων και Τενόντων Γόνατος.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΟΠΗ, ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ
"PREMIUM ELASTIC KNEE SILICONE"

Κωδικός	ELASTIC KNEE SILICONE			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Γόνατος σε εκ.	29/33	33/37	37/41	41/44
Μήκος σε εκ.	30	30	30	30
Χρώμα	Λευκό			

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Υφασμα με πλέξη δύο στρωμάτων (2-D) από δυναμικές αεριζόμενες ελαστικές μικροϊνες με αντιαλλεργική, μη τοξική, αντιεφιδρωτική, αντιολισθητική δράση.
- Διαθέτει δύο πλάγιες πλαστικές εύκαμπτες μπανέλες.
- Ανατομικό επίθεμα **σιλικόνης** σε σχήμα **"δακτυλίδι"**.
- Αυξάνει την αιμάτωση μέσω της συνεχούς **"μικρομάλαξης"**.
- **Προκαλεί την ταχεία απορρόφηση Οίδημάτων.**
- **"Ομαλοποιεί"** τις παραμορφώσεις των μαλακών ιστών.
- Προκαλεί βαθμιαία **δυναμική συμπίεση** και σταθεροποίηση.
- **Περιορίζει την κινητικότητα της Επιγονατίδος και την διατηρεί στην Ανατομική της Θέση.**
- Μπορεί να πλυθεί.




Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση:
Οστεοαρθρίτιδα (OA), Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Γόνατος (RA).
Χονδροπάθεια Επιγονατίδος, Επιγονατιδομηριαία Αρθρίτιδα.
Προεπιγονατιδική, Υποεπιγονατιδική Ορογονοθυλακίτιδα.
Σύνδρομο Χαμηλής Επιγονατίδος "PATELLA BAJA".
Σύνδρομο Υψηλής Επιγονατίδος "PATELLA ALTA".
Σύνδρομο Επιγονατιδομηριαίου Άλγους (PFPS).

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "GENU HIT"

Κωδικός	GENU HIT						
Μέγεθος	1	2	3	4	5	6	7
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56
Περιφέρεια Κνήμης σε εκ.	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46
Μήκος σε εκ.	30	30	30	30	30	30	30
Χρώμα	Γκρι						



- Κατασκευή από ύφασμα τριπλής περιέλιξης υψηλής ποιότητας, 67% πολυαμίδη, 33% ελαστικές ίνες.
- Ειδική πλέξη τριών στρωμάτων **(3-D)** τύπου **"MICROKLIMA"** από δυναμικές αεριζόμενες ίνες με αντιαλλεργική, αντιφιδρωτική, μη τοξική δράση υψηλής αντοχής.
- Διαθέτει δύο πλάγιες εύκαμπτες πλαστικές μπανέλες.
- Ανατομικό επίθεμα **σιλικόνης** σε σχήμα **"δακτυλίδι"**.
- Αυξάνει την αιμάτωση μέσω της συνεχούς **"μικρομάλαξης"**.
- **Προκαλεί την ταχεία απορρόφηση Οιδημάτων.**
- **"Ομαλοποιεί"** τις παραμορφώσεις των μαλακών ιστών.
- Προκαλεί βαθμιαία **δυναμική συμπίεση** και σταθεροποίηση.
- **Περιορίζει την κινητικότητα της Επιγονατίδος και την διατηρεί στην Ανατομική της θέση.**
- Μπορεί να πλυθεί.

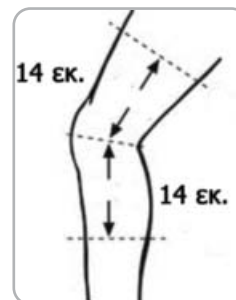


Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση: Οστεοαρθρίτιδα (OA), Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Γόνατος (RA). Χονδροπάθεια Επιγονατίδος, Επιγονατιδομηριαία Αρθρίτιδα. Προεπιγονατιδική, Υποεπιγονατιδική Ορογονοθυλακίτιδα. Σύνδρομο Χαμηλής Επιγονατίδος **"PATELLA BAJA"**. Σύνδρομο Υψηλής Επιγονατίδος **"PATELLA ALTA"**. Σύνδρομο Επιγονατιδομηριαίου Άλγους (PFPS).

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "GENULASTIK"

Κωδικός	GENULASTIK							
Μέγεθος	0	1	2	3	4	5	6	7
Περιφέρεια Μηνύ σε εκ.	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
Περιφέρεια Κνήμης σε εκ.	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46	46/49
Μήκος σε εκ.	32	32	32	32	32	32	32	32
Χρώμα	Γκρι / Γαλάζιο							

- Κατασκευή από πολυαμίδη, ελαστικές συνθετικές ίνες τύπου "AF" και ελαστικές ίνες "ELASTANE", υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Υφασμα με πλέξη τριών στρωμάτων (3-D) από δυναμικές αεριζόμενες ελαστικές μικροίνες με αντιαλλεργική, μη τοξική, αντιεφιδρωτική, αντιολισθητική δράση.
- Πλέξη τύπου "WRINKLE RAIL", για την αποφυγή πτυχώσεων που μπορεί να δημιουργήσουν δερματολογικά προβλήματα.
- Διαθέτει δύο πλάγιες πλαστικές εύκαμπτες μανέλες.
- Ανατομικό επίθεμα **σιλικόνης** σε σχήμα "δακτυλίδι".
- Αυξάνει την αιμάτωση μέσω της συνεχούς "μικρομάλαξης".
- Προκαλεί την ταχεία απορρόφηση Οιδημάτων.
- "Ομαλοποιεί" τις παραμορφώσεις των μαλακών ιστών.
- Προκαλεί βαθμιαία **δυναμική συμπίεση** και σταθεροποίηση.
- Περιορίζει την κινητικότητα της Επιγονατίδος και την διατηρεί στην Ανατομική της θέση.
- Μπορεί να πλυθεί.

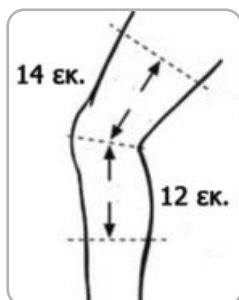


Ενδείξεις: Ιδανική για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση:
 Οστεοαρθρίτιδα (OA), Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Γόνατος (RA).
 Χονδροπάθεια Επιγονατίδος, Επιγονατιδομηριαία Αρθρίτιδα.
 Προεπιγονατιδική, Υποεπιγονατιδική Ορογονοθυλακίτιδα.
 Σύνδρομο Χαμηλής Επιγονατίδος "PATELLA BAJA".
 Σύνδρομο Υψηλής Επιγονατίδος "PATELLA ALTA".
 Σύνδρομο Επιγονατιδομηριαίου Άλγους (PFPS).

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "MENISCUS"

Κωδικός	MENISCUS						
Μέγεθος	1	2	3	4	5	6	7
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56
Περιφέρεια Κνήμης σε εκ.	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46
Μήκος σε εκ.	30	30	30	30	30	30	30
Χρώμα	Γκρι						



- Κατασκευή από ύφασμα τριπλής περιέλιξης υψηλής ποιότητας, 67% πολυαμίδη, 33% ελαστικές ίνες.
- Ειδική πλέξη τριών στρωμάτων (3-D) τύπου "MICROKLIMA" από δυναμικές αεριζόμενες ίνες με αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική, μη τοξική δράση υψηλής αντοχής.
- Διαθέτει δύο πλάγιες εύκαμπτες πλαστικές μπανέλες.
- Διαθέτει επίθεμα σιλικόνης ανατομικής σχεδίασης με σχήμα πετάλου για σταθεροποίηση της Επιγονατίδας.
- Διαθέτει σφαιρικά αυτοκόλλητα επιθέματα πολυουρεθάνης εφαρμογής στα Μεσάρθρια διαστήματα του Γόνατος.
- Προκαλεί δυναμική και βαθμιαία Συνδεσμική σταθεροποίηση.
- Μπορεί να πλυθεί.

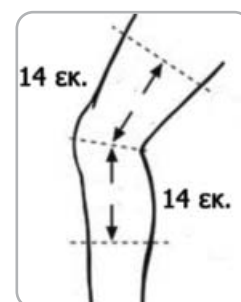


Ενδείξεις: Ιδανική για την Θεραπευτική Αποκατάσταση σε: Τραυματικές Κακώσεις Μηνίσκων, Εκφυλιστικές Ρήξεις Μηνίσκων.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "OSGOOD SCHLATTER"

Κωδικός	OSGOOD SCHLATTER							
Μέγεθος	0	1	2	3	4	5	6	7
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	Έως 35	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56
Περιφέρεια Κνήμης σε εκ.	Έως 25	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46
Μήκος σε εκ.	30	30	30	30	30	30	30	30
Χρώμα	Γκρι							

- Κατασκευή από ύφασμα τριπλής περιέλιξης υψηλής ποιότητας, 67% πολυαμίδη, 33% ελαστικές ίνες.
- Ειδική πλέξη τριών στρωμάτων (3-D) τύπου "MICROKLIMA" από δυναμικές αεριζόμενες ίνες με αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική δράση.
- Διαθέτει δύο πλάγιες εύκαμπτες πλαστικές μπανέλες.
- Διαθέτει επιθέματα σιλικόνης ανατομικής σχεδίασης. Το πρώτο τμήμα σιλικόνης σταθεροποιεί την Επιγονατίδα. Το δεύτερο τμήμα σταθεροποιεί το Κνημιαίο Κύρτωμα.
- Προκαλεί δυναμική και βαθμιαία Συνδεσμική σταθεροποίηση.
- Μπορεί να πλυθεί.

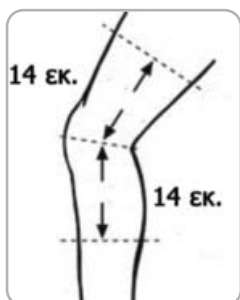

Ενδείξεις: Ιδανική για την Θεραπευτική Αποκατάσταση του Συνδρόμου "OSGOOD - SCHLATTER".

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ "PATELLA DYN"

Κωδικός	PATELLA DYN						
Μέγεθος	1	2	3	4	5	6	7
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56
Περιφέρεια Κνήμης σε εκ.	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46
Μήκος σε εκ.	30	30	30	30	30	30	30
Χρώμα	Γκρι						


Δεξιά - Αριστερή



- Κατασκευή από ύφασμα τριπλής περιέλιξης υψηλής ποιότητας.
- Ειδική πλέξη τριών στρωμάτων (3-D) τύπου "MICROKLIMA" από δυναμικές αεριζόμενες ίνες, 67% πολυαμίδη, 33% ελαστικές ίνες.
- Διαθέτει δύο εύκαμπτες πλάγιες πλαστικές μπανέλες.



- Προκαλεί δυναμική και βαθμιαία Συνδεσμική σταθεροποίηση.
- Διπλό επίθεμα σιλικόνης το οποίο συνδέεται με ιμάντες.
- Περιορίζει την αστάθεια της Επιγονατίδος και την διατηρεί στην ανατομική της θέση.
- Μπορεί να πλυθεί.

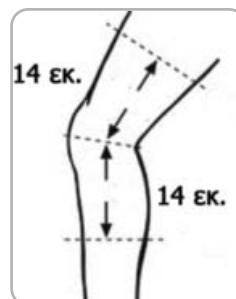


ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΙ ΟΠΗ

Κωδικός	416					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	Ανω 48
Μήκος σε εκ.	30	30	30	30	30	30
Χρώμα	Μαύρο					

Δεξιά - Αριστερή



- Κατασκευή από **NEOPRENE**, ειδικών πόρων "RUBATEX".
- Εσωτερική επένδυση από βελούδινο ύφασμα με απορροφητικό υλικό.
- Διαθέτει θήκη σε "μορφή J" με επίθεμα σταθεροποίησης.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες.
- Πλάγιες εύκαμπτες μεταλλικές σπειροειδείς μπανέλες.
- Περιορίζει την αστάθεια της Επιγονατίδος και την διατηρεί στην ανατομική της θέση.
- Μπορεί να πλυθεί.

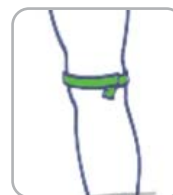

Ενδείξεις: Ιδανικές για την Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Χρόνιο Υπερξάρθρωμα Επιγονατίδος - Σύνδρομο Υπερκινητικής Επιγονατίδος (**PATELLAR HYPERMOBILITY**).
 Σύνδρομο Υπέρμετρης Εξωτερικής Συμπίεσης Επιγονατίδος - Σύνδρομο Κακής Παθολογικής Ευθυγράμμισης Επιγονατίδος.
 Σύνδρομο Κακής Ολίσθησης Επιγονατίδος (**PATELLA MALTRACKING**) - Σύνδρομο Αυξημένης Πλάγιας Πίεσης Επιγονατίδος.
 Σύνδρομο Υμενικής Πτυχής (**PLICA SYNDROME**) - Σύνδρομο Σφικτικής Δομής του Έξω Καθεκτικού Συνδέσμου (**LPSC**).

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ "TRU - PULL ADVANCED SYSTEM"

Κωδικός Μέγεθος	TRU - PULL					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	33/39	39/47	47/53	53/59,5	59,5/67	67/75
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30,5/33	33/35,5	35,5/38	38/43	43/48	48/53
Περιφέρεια Κνήμης σε εκ.	25,5/30,5	30,5/35,5	35,5/40,5	40,5/47	47/50,5	50,5/56
Μήκος σε εκ.	35	35	35	35	35	35
Χρώμα	Μαύρο					
	Δεξιός - Αριστερός					

- Κατασκευή εξωτερικά από μεμβρανώδες αδιάβροχο ύφασμα 100 % υψηλής τεχνολογίας αεριζόμενο διχτυωτό τύπου **"DRYTEX"**.
- Δύο αυτοκόλλητοι σταθεροποιητικοί ιμάντες μεγάλου μήκους.
- Ελαστομερές πολυστρωματικό, αυτοκόλλητο πεταλοειδές εξάρτημα.
- **Ο Νάρθηκας ομαλοποιεί την διαδρομή της Επιγονατίδας επί της Μηριαίας Τροχιλίας προσφέροντας δυναμική έλξη αποφεύγοντας το Υπερξάρθρωμα ή το Εξάρθρωμά της.**
- Μπορεί να πλυθεί



Κατά την Κάμψη Γόνατος 45°
πριν την εφαρμογή του
Νάρθηκα TRU PULL HINGED
ADVANCED SYSTEM.



Κατά την Κάμψη Γόνατος 45°
μετά την εφαρμογή του
Νάρθηκα TRU PULL HINGED
ADVANCED SYSTEM.

Ενδείξεις: Ιδανικός για την Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Χρόνιο Υπερξάρθρωμα Επιγονατίδας (**SUBLUXATION PATELLA**).
Αυτόματο Εξάρθρωμα Επιγονατίδας (**DISLOCATION PATELLA**).
Τραυματικό Εξάρθρωμα Επιγονατίδας (**DISLOCATION PATELLA**).



ΑΠΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ "OBJECT"

Κωδικός	460					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	27/30	31/33	34/36	37/39	40/43	44/47
Μήκος σε εκ.	26	26	26	26	26	26
Χρώμα	Μαύρο					



- Κατασκευή από **NEOPRENE** κλειστής κυλινδρικής μορφής ειδικών πόρων "**RUBATEX**", υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αντιιοσθητική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει οπίσθια ενισχυμένη ραφή.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε: Παθήσεις, Κακώσεις Γόνατος, Επιγονατίδος.

ΑΠΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ

Κωδικός	K / 460					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/38	38/43	43/48	48/56
Μήκος σε εκ.	25	25	25	25	25	25
Χρώμα	Μαύρο					



- Κατασκευή από **NEOPRENE** και ελαστικές ίνες "**ELASTANE**" κλειστής κυλινδρικής μορφής, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό νάυλον ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αντιιοσθητική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει οπίσθια ενισχυμένη ραφή.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε: Παθήσεις, Κακώσεις Γόνατος, Επιγονατίδος.

ΑΠΛΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΟΠΗ "OBJECT"

Κωδικός	463					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	27/30	31/33	34/36	37/39	40/43	44/47
Μήκος σε εκ.	26	26	26	26	26	26
Χρώμα	Μαύρο					

- Κατασκευή από **NEOPRENE** κλειστής κυλινδρικής μορφής ειδικών πόρων "**RUBATEX**", υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αντιολισθητική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει οπίσθια ενισχυμένη ραφή.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε: Παθήσεις, Κακώσεις Γόνατος, Επιγονατίδος.



ΑΠΛΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΟΠΗ

Κωδικός	K / 463					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/38	38/43	43/48	48/56
Μήκος σε εκ.	25	25	25	25	25	25
Χρώμα	Μαύρο					

- Κατασκευή από **NEOPRENE** και ελαστικές ίνες "**ELASTANE**" κλειστής κυλινδρικής μορφής, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό νάυλον ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αντιολισθητική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει οπίσθια ενισχυμένη ραφή.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε: Παθήσεις, Κακώσεις Γόνατος, Επιγονατίδος.




New



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΟΠΗ

Κωδικός	K / 8246
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/50
Μήκος σε εκ.	28
Χρώμα	Μαύρο

- Κατασκευή από **NEOPRENE** και ελαστικές ίνες "**ELASTANE**" κυλινδρικής μορφής, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Επένδυση από απορροφητικό νάυλον για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει κυκλική ενισχυμένη θήκη για σταθεροποίηση της Επιγονατίδας.
- Δύο αυτοκόλλητοι μεγάλο μήκους κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες, που καθιστούν την επιγονατίδα κοινού μεγέθους.
- Μπορεί να πλυθεί.

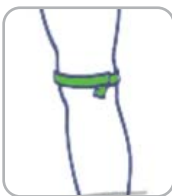

Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε:
Τενοντίτις Επιγονατιδικού "**JUMPER'S KNEE**"
Χονδροπάθεια Επιγονατίδος **GRADE I, II (CMP)**.


New



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΟΠΗ

Κωδικός	KED / 8246
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	Έως 60
Μήκος σε εκ.	25
Χρώμα	Γκρι

- Κατασκευή από **NEOPRENE PROLITE**, πολυέστερ, πολυαμίδη.
- Όλα τα υλικά του είναι αντιαλλεργικά, μη τοξικά, αντιεφιδρωτικά, με αντιολισθητική δράση, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτει αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες μεγάλο μήκους που την καθιστούν **κοινού μεγέθους**.
- Διαθέτει ενισχυμένη κυκλική θήκη σταθεροποίησης της Επιγονατίδας.
- Μπορεί να πλυθεί.

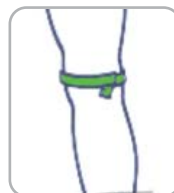

Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε:
Τενοντίτις Επιγονατιδικού "**JUMPER'S KNEE**"
Χονδροπάθεια Επιγονατίδος **GRADE I, II (CMP)**.

**ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΟΠΗ
"OBJECT"**

Κωδικός	8246
Μέγεθος	Κοινό
Μήκος σε εκ.	30
Χρώμα	Μαύρο

- Κατασκευή από διπλό στρώμα **NEOPRENE** ανοιχτής κυλινδρικής μορφής ειδικών πόρων **"RUBATEX"**, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εξωτερική επένδυση από χνουδώτο νάυλον.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αντιολισθητική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες μεγάλου μήκους που την καθιστούν **κοινού μεγέθους**.
- Διαθέτει κυκλική θήκη για την εισαγωγή **πεταλοειδούς εξαρτήματος** σταθεροποίησης της Επιγονατίδας.
- Μπορεί να πλυθεί.

Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανένταξη στην άθληση σε:
Τενοντίτις Επιγονατιδικού **"JUMPER'S KNEE"**
Χονδροπάθεια Επιγονατίδος **GRADE I, II (CMP)**.

**ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΟΠΗ**

Κωδικός	MED / 8246
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	28/45
Μήκος σε εκ.	24
Χρώμα	Μπεζ

- Κατασκευή από ύφασμα **"AEROPRENE"** 60% (αεριζόμενο **NEOPRENE**), πολυαιθέρα 20%, βαμβάκι 15%, υποαλλεργικό αντιβακτηριακό Latex 5%.
- Όλα τα υλικά του είναι αντιαλλεργικά, μη τοξικά, αντιεφιδρωτικά, με αντιολισθητική δράση, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτει αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες μεγάλου μήκους που την καθιστούν **κοινού μεγέθους**.
- Διαθέτει ενισχυμένη κυκλική θήκη σταθεροποίησης της Επιγονατίδας.
- Μπορεί να πλυθεί.

Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανένταξη στην άθληση σε:
Τενοντίτις Επιγονατιδικού **"JUMPER'S KNEE"**
Χονδροπάθεια Επιγονατίδος **GRADE I, II (CMP)**.



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ "OBJECT"

Κωδικός	404					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Μήκος σε εκ.	33	33	33	33	33	33
Χρώμα	Μαύρο / Μπλε					



- Κατασκευή από **NEOPRENE** κλειστής κυλινδρικής μορφής ειδικών πόρων **"RUBATEX"**, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εξωτερική επένδυση από ελαστικό **"TUBULAR JERSEY"**.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αντιολισθητική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει οπίσθιες αεροφόρες οδούς.
- Διαθέτει κυκλική θήκη για την εισαγωγή πεταλοειδούς εξαρτήματος σταθεροποίησης της Επιγονατίδας.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε:
Τενοντίτις Επιγονατιδικού **"JUMPER'S KNEE"**
Χονδροπάθεια Επιγονατίδος **GRADE I, II (CMP)**.
Σύνδρομο Επιγονατιδομηριαίου Άλγους (**PFPS**).

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ

Κωδικός	K / 404					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/38	38/43	43/48	48/56
Μήκος σε εκ.	31	31	31	31	31	31
Χρώμα	Μαύρο					



- Κατασκευή από **NEOPRENE** και ελαστικές ίνες **"ELASTANE"** κλειστής κυλινδρικής μορφής, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό νάυλον ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αντιολισθητική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει κυκλική θήκη για την εισαγωγή πεταλοειδούς εξαρτήματος σταθεροποίησης της Επιγονατίδας.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε:
Τενοντίτις Επιγονατιδικού **"JUMPER'S KNEE"**
Χονδροπάθεια Επιγονατίδος **GRADE I, II (CMP)**.
Σύνδρομο Επιγονατιδομηριαίου Άλγους (**PFPS**).

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "OBJECT"

Κωδικός	408					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Μήκος σε εκ.	33	33	33	33	33	33
Χρώμα	Μαύρο / Μπλε					

- Κατασκευή από **NEOPRENE** κλειστής κυλινδρικής μορφής, ειδικών πόρων **"RUBATEX"** υψηλής ποιότητας και αντοχής.

- Εξωτερική επένδυση από ελαστικό **"TUBULAR JERSEY"**.

- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αντιολισθητική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.


- Διαθέτει οπίσθιες αεροφόρες οδούς.

- Διαθέτει κυκλική θήκη για την εισαγωγή πεταλοειδούς εξαρτήματος σταθεροποίησης της επιγονατίδας.

- **Πλάγιες εύκαμπτες μεταλλικές σπειροειδείς μπανέλες.**

- Διο αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες.

- Μπορεί να πλυθεί.

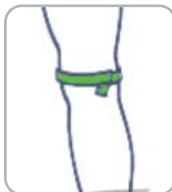

Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε:
Κακώσεις Πλάγιων Συνδέσμων (**MCL - LCL**).

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

Κωδικός	K / 408
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/50
Μήκος σε εκ.	28
Χρώμα	Μαύρο

- Κατασκευή από **NEOPRENE** και ελαστικές ίνες **"ELASTANE"** κυλινδρικής μορφής, υψηλής ποιότητας και αντοχής.

- Επένδυση από απορροφητικό νάυλον για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.

- Διαθέτει κυκλική ενισχυμένη θήκη για σταθεροποίηση της Επιγονατίδας.

- **Πλάγιες εύκαμπτες μεταλλικές σπειροειδείς μπανέλες.**

- Δύο αυτοκόλλητοι μεγάλου μήκους κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες, που καθιστούν την επιγονατίδα κοινού μεγέθους.

- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε:
Κακώσεις Πλάγιων Συνδέσμων (**MCL - LCL**).

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE ΑΕΡΟΤΕCH ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

New



Κωδικός KED / 408


Μέγεθος Κοινό

Περιφέρεια Γόνατος σε εκ. Έως 60

Μήκος σε εκ. 25

Χρώμα Μαύρο

- Κατασκευή από **NEOPRENE ΑΕΡΟΤΕCH**, πολυέστερ, πολυαμίδη.
- Επένδυση από απορροφητικό νάυλον για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει κυκλική ενισχυμένη θήκη για σταθεροποίηση της Επιγονατίδος.
- **Πλάγιες εύκαμπτες μεταλλικές σπειροειδείς μπανέλες.**
- Δύο αυτοκόλλητοι μεγάλοι μήκους κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες, που καθιστούν την επιγονατίδα κοινού μεγέθους.
- Μπορεί να πλυθεί.

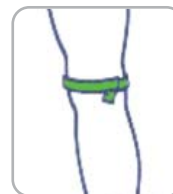

Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε:
Κακώσεις Πλάγιων Συνδέσμων (MCL - LCL).

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE ΑΕΡΟΤΕCH ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΚΑΜΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

New



Κωδικός KED / 415


Μέγεθος Κοινό

Περιφέρεια Γόνατος σε εκ. Έως 60

Μήκος σε εκ. 29

Χρώμα Μαύρο

- Κατασκευή από **NEOPRENE ΑΕΡΟΤΕCH**, πολυέστερ, πολυαμίδη.
- Επένδυση από απορροφητικό νάυλον για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει κυκλική ενισχυμένη θήκη για σταθεροποίηση της Επιγονατίδος.
- **Άκαμπτες μεταλλικές μπανέλες με πολυκεντρική διάρθρωση.**
- Δύο αυτοκόλλητοι μεγάλοι μήκους κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες, που καθιστούν την επιγονατίδα κοινού μεγέθους.
- Μπορεί να πλυθεί.

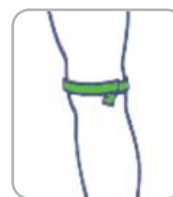

Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε:
Κακώσεις Πλάγιων Συνδέσμων (MCL - LCL).
Κακώσεις Μηνίσκων Γόνατος.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΚΑΜΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "OBJECT"

Κωδικός	415					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Μήκος σε εκ.	33	33	33	33	33	33
Χρώμα	Μαύρο / Μπλε					

- Κατασκευή από **NEOPRENE** κλειστής κυλινδρικής μορφής ειδικών πόρων **"RUBATEX"**, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εξωτερική επένδυση από ελαστικό **"TUBULAR JERSEY"**.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αντιολισθητική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει οπίσθια ενισχυμένη ραφή και αεροφόρες οδούς.
- Διαθέτει κυκλική θήκη για την εισαγωγή πεταλοειδούς εξαρτήματος σταθεροποίησης της επιγονατίδας.
- **Άκαμπτες μεταλλικές μπανέλες με πολυκεντρική διάρθρωση.** Διαθέτει εξαρτήματα ρύθμισης Κάμψης σε θέσεις 60° και 90°.
- Διο αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες.
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε:
Κακώσεις Πλάγιων Συνδέσμων (MCL - LCL) -
Κακώσεις Μηνίσκων Γόνατος.



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΚΑΜΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "OBJECT"

Κωδικός	420					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Μήκος σε εκ.	33	33	33	33	33	33
Χρώμα	Μαύρο / Μπλε					

- Κατασκευή από **NEOPRENE** ειδικών πόρων **"RUBATEX"**.
- Εξωτερική επένδυση από ελαστικό **"TUBULAR JERSEY"**.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, με αντιεφιδρωτική, αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Διαθέτει οπίσθια ενισχυμένη ραφή.
- **Άκαμπτες μεταλλικές μπανέλες με πολυκεντρική διάρθρωση.** Διαθέτει εξαρτήματα ρύθμισης Κάμψης σε θέσεις 60° και 90°.
- Διο αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες.
- **Πρόσθια αυτοκόλλητη εφαρμογή.**
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανική για την Επανάταξη στην άθληση σε:
Κακώσεις Πλάγιων Συνδέσμων (MCL - LCL).
Κακώσεις Μηνίσκων Γόνατος.






ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΜΗΡΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE "OBJECT"

Κωδικός	8233				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περ. Μηρού σε εκ.	48/51	52/55	56/60	61/65	66/71
Χρώμα	Μπλε				

- Κατασκευή από **NEOPRENE** κλειστής κυλινδρικής μορφής ειδικών πόρων "**RUBATEX**" υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Πρόσθια κεντρική διπλή επίστρωση **NEOPRENE**.
- Μπορεί να πλυθεί.

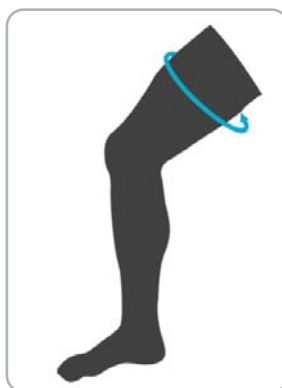


Ενδείξεις: Ιδανική για Επανάταξη στην άθληση σε: Κακώσεις, Θλάσεις Μυών Μηρού.



ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΜΗΡΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE

Κωδικός	K / 8233				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περ. Μηρού σε εκ.	42/45	46/49	50/53	54/58	58/63
Χρώμα	Μαύρο				

- Κατασκευή από **NEOPRENE** και ελαστικές ίνες "**ELASTANE**" υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Μπορεί να πλυθεί.

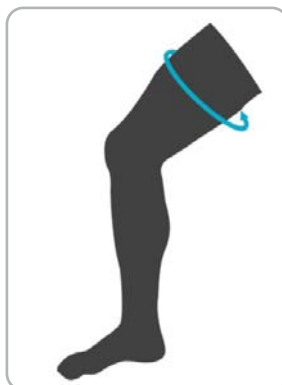


Ενδείξεις: Ιδανική για Επανάταξη στην άθληση σε: Κακώσεις, Θλάσεις Μυών Μηρού.

ΑΓΛΗ ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE "OBJECT"

Κωδικός	8234				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περ. Κνήμης σε εκ.	33/35	35/38	38/43	43/48	48/53
Χρώμα	Μπλε				

- Κατασκευή από **NEOPRENE** κλειστής κυλινδρικής μορφής ειδικών πόρων "**RUBATEX**" υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Μπορεί να πλυθεί.

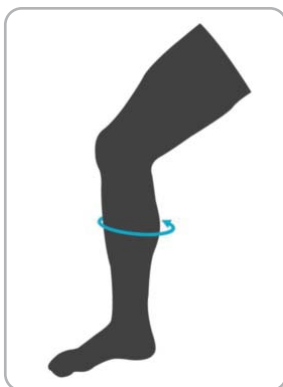


Ενδείξεις: Ιδανική για Επανένταξη στην άθληση σε: Κακώσεις, Θλάσεις Μυός Γαστροκνημίου.

ΑΓΛΗ ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΑ ΑΠΟ NEOPRENE

Κωδικός	K / 8234				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περ. Κνήμης σε εκ.	29/32	33/36	37/39	40/42	42/45
Χρώμα	Μαύρο				

- Κατασκευή από **NEOPRENE** και ελαστικές ίνες "**ELASTANE**" υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, για μείωση και απορρόφηση του ιδρώτα με αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- Μπορεί να πλυθεί.

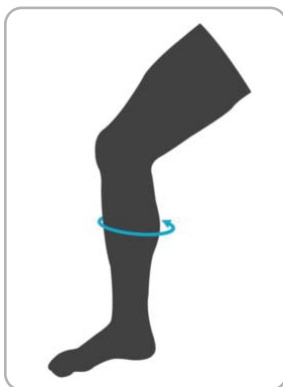

Ενδείξεις: Ιδανική για Επανένταξη στην άθληση σε: Κακώσεις, Θλάσεις Μυός Γαστροκνημίου.



**ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
"KNEE IMMOBILIZER"**

Κωδικός	K/8004	K/8005	K/8006	K/ 8007
Μήκος σε εκ.	31	36	51	61

Μεγέθη	Κοινά
Χρώμα	Μαύρο

- Κατασκευή από νάυλον και **FOAM** πολυουρεθάνης.
- Επένδυση από ύφασμα αντιαλλεργικό, αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό, μη τοξικό, τύπου **"TERRY"** βαμβακερό.
- Οπίσθιες άκαμπτες μπανέλες.
- Πλάγιοι αυτοκόλλητοι μηχανισμοί με μπανέλες αλουμινίου οι οποίες καθιστούν το Νάρθηκα **κοινού μεγέθους**.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες που εφαρμόζουν με πλαστικούς μηχανισμούς.
- Αντικαθιστά πλήρως τη συμβατική επίδεση τύπου **"ROBERT JONES"**.
- Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε: Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα **GRADE IIIA, IIIB**. Απαραεκτήπιστο Κάταγμα Κνημιαίου Κυρτώματος. Εξάρθρωμα Επιγονατίδος Χωρίς πλήρη Ρήξη Συνδέσμων. Απαραεκτήπιστο Αποσπαστικό Κάταγμα Επιγονατίδος. Απαραεκτήπιστο Κάταγμα Έσω, Έξω Επικονδύλου.



ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ "ΙΜΜΟ"

Κωδικός	4004
Μέγεθος	Κοινό
Μήκος σε εκ.	51

- Κατασκευή από σκληρό πολυπροπυλενίο.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες που εφαρμόζουν με μεταλλικούς μηχανισμούς και αυτοκόλλητο.
- Μαλακά μαξιλαράκια που τοποθετούνται παραπλευρώς της Επιγονατίδος για άνεση.
- **Ιδανικό για Ασθενείς που δεν επιδέχονται ολοκληρωμένες υφασμάτινες επενδύσεις λόγω επιφανειακών Τραυματισμών και Συρραφών.**
- **Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλο Οίδημα στο Γόνατο.**

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Αποκατάσταση σε: Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος.

**ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
"PREMIUM KNEE IMMOBILIZER"**

Κωδικός	8004	8005	8006	8007
Μήκος σε εκ.	31	36	51	61
Μεγέθη	Κοινά			
Χρώμα	Μαύρο			

- Κατασκευή από υψηλής ποιότητας νάυλον και **FOAM**.
- Επένδυση από ύφασμα αντιαλλεργικό, αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό.
- Οπίσθιες άκαμπτες μεταλλικές μπανέλες.
- Πλάγιοι αυτοκόλλητοι μηχανισμοί με μπανέλες αλουμινίου οι οποίες καθιστούν το Νάρθηκα **κοινού μεγέθους**.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες που εφαρμόζουν με πλαστικούς μηχανισμούς.
- Διαθέτει οπίσθιο εσωτερικό αυτοκόλλητο μαξιλάρι από **FOAM**.
- Αντικαθιστά πλήρως τη συμβατική επίδεση τύπου **"ROBERT JONES"**.
- Μπορεί να πλυθεί



Ενδείξεις Ιδανικός για τη Συντηρητική Αποκατάσταση σε:
Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα **GRADE IIIA, IIIB**.
Απαραεκτήπιστο Κάταγμα Κνημιαίου Κυρτώματος.
Εξάρθρωση Επιγονατίδος Χωρίς πλήρη Ρήξη Συνδέσμων.
Απαραεκτήπιστο Αποσπαστικό Κάταγμα Επιγονατίδος.
Απαραεκτήπιστο Κάταγμα Έσω, Έξω Επικονδύλου.



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ "ACTIVUM REGULAR"

Κωδικός	9429					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/56
Μήκος σε εκ.	33	33	33	33	33	33
Χρώμα	Μπλε					



- Κατασκευή από **NEOPRENE** ειδικών πόρων "**RUBATEX**" υψηλής ποιότητας και αντοχής με εξωτερική επένδυση από χνουδωτό νάυλον.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, με αντιεφιδρωτική, αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- **Πλάγιες άκαμπτες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου.**
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης "**RANGER II**", Κάμψης - Έκτασης σε θέσεις: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°.
- Αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες.
- **Διαθέτει πρόσθια αυτοκόλλητη εφαρμογή.**
- Μπορεί να πλυθεί.



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ "ACTIVUM REGULAR"

Κωδικός	K / 9429					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/38	38/43	43/48	48/56
Μήκος σε εκ.	30	30	30	30	30	30
Χρώμα	Μαύρο					



- Κατασκευή από **NEOPRENE** και ελαστικές ίνες "**ELASTANE**".
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό νάυλον ύφασμα, με αντιεφιδρωτική, αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- **Πλάγιες άκαμπτες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου.**
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης "**RANGER II**", Κάμψης - Έκτασης σε θέσεις: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°.
- Αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες.
- **Διαθέτει πρόσθια αυτοκόλλητη εφαρμογή.**
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικοί για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ανεπάρκεια Πρόσθιου Χιαστού Γόνατος **GRADE I, II (ACL)** - Ανεπάρκεια Οπίσθιου Χιαστού Γόνατος **GRADE I, II (PCL)**.

Ρήξη Έσω Πλάγιου Συνδέσμου Γόνατος **GRADE II, III (MCL)** - Ρήξη Έξω Πλάγιου Συνδέσμου Γόνατος **GRADE II, III (LCL)**.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ "ACTIVUM LONG"

Κωδικός	9430					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/56
Μήκος σε εκ.	40	40	40	40	40	40
Χρώμα	Μπλε					

- Κατασκευή από **NEOPRENE** ειδικών πόρων "**RUBATEX**" υψηλής ποιότητας και αντοχής με εξωτερική επένδυση από χνουδωτό νάυλον.
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό διάτρητο ύφασμα, με αντιεφιδρωτική, αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- **Πλάγιες άκαμπτες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου.**
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης "**RANGER II**", Κάμψης - Έκτασης σε θέσεις: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°.
- Αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες.
- **Διαθέτει πρόσθια αυτοκόλλητη εφαρμογή.**
- Μπορεί να πλυθεί.



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΠΟ NEOPRENE ΜΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ "ACTIVUM LONG"

Κωδικός	K / 9430					
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γόνατος σε εκ.	30/33	33/36	36/38	38/43	43/48	48/56
Μήκος σε εκ.	40	40	40	40	40	40
Χρώμα	Μαύρο					

- Κατασκευή από **NEOPRENE** και ελαστικές ίνες "**ELASTANE**".
- Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό νάυλον ύφασμα, με αντιεφιδρωτική, αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική δράση.
- **Πλάγιες άκαμπτες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου.**
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης "**RANGER II**", Κάμψης - Έκτασης σε θέσεις: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°.
- Αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες.
- **Διαθέτει πρόσθια αυτοκόλλητη εφαρμογή.**
- Μπορεί να πλυθεί.



Ενδείξεις: Ιδανικοί για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ανεπάρκεια Πρόσθιου Χιαστού Γόνατος **GRADE I, II (ACL)** - Ανεπάρκεια Οπίσθιου Χιαστού Γόνατος **GRADE I, II (PCL)**.


Ρήξη Έσω Πλάγιου Συνδέσμου Γόνατος **GRADE II, III (MCL)** - Ρήξη Έξω Πλάγιου Συνδέσμου Γόνατος **GRADE II, III (LCL)**.



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ "EVERYDAY"

Κωδικός	9431			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	39/47	47/53	53/59	59/67
Περιφ. Γόνατος σε εκ.	33/35	35/38	38/43	43/48
Περιφ. Κνήμης σε εκ.	30/35	35/40	40/47	47/51
Μήκος σε εκ.	43	43	43	43

- Κατασκευή κοιλοτήτων από "KYDEX" θερμοδιαμορφώσιμο υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερικές επενδύσεις οι οποίες μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες με μηχανισμούς και αυτοκόλλητο.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης "RANGER II", Κάμψης - Έκτασης σε θέσεις: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°.
- Χωρίς εξάρτημα ρύθμισης. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής. Πλάγια Κονδυλικά **PADS**.
- Ιδανικός για μακρά χρήση.

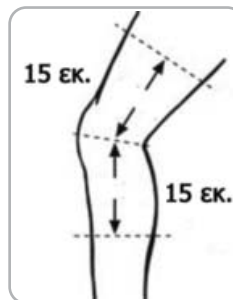

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Αποκατάσταση σε:
Ρήξη Έσω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (MCL)**
Ρήξη Έξω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (LCL)**
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού (**ACL**).
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού (**PCL**).




ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ "WEEKENDER"

Κωδικός	9435			
Μέγεθος	S	M	L	XL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	39/47	47/53	53/59	59/67
Περιφ. Γόνατος σε εκ.	33/35	35/38	38/43	43/48
Περιφ. Κνήμης σε εκ.	30/35	35/40	40/47	47/51
Μήκος σε εκ.	43	43	43	43

Δεξιός - Αριστερός

- Κατασκευή κοιλοτήτων από ελαφρύ κράμα αλουμινίου με δερμάτινη επένδυση.
- Εσωτερικές διπλές επενδύσεις οι οποίες μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες με μηχανισμούς και αυτοκόλλητο.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης "RANGER II", Κάμψης - Έκτασης σε θέσεις: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°.
- Χωρίς εξάρτημα ρύθμισης. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής. Πλάγια αφρώδη Κονδυλικά **PADS**.
- Ιδανικός για μακρά χρήση.

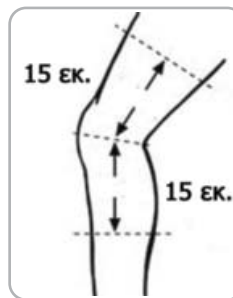

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Αποκατάσταση σε:
Ρήξη Έσω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (MCL)**
Ρήξη Έξω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (LCL)**
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού (**ACL**).
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού (**PCL**).

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ "PLUSPOINT"

Κωδικός	9440				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Βάρος σε γραμ.	711	732	751	775	812
Μήκος σε εκ.	40	40	40	40	40

Δεξιός - Αριστερός

- Κατασκευή από ελαφρύ κράμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Αφρώδεις αντιαλλεργικές επενδύσεις που μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες με μηχανισμούς και αυτοκόλλητο.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης "PLUSPOINT" με ειδικά εξαρτήματα σε θέσεις Κάμψης: 45° - 60° - 75° - 90°, σε θέσεις Έκτασης: 0° - 10° - 20° - 30° - 40°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής. Πλάγια Αφρώδη Κονδυλικά **PADS**.

- **Εξαρτήματα ρύθμισης Κάμψης 0° και 20°.**
Πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Με κωδικό 9440 PINS.



- Ιδανικός για μακρά χρήση.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Αποκατάσταση σε:
Ρήξη Έσω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (MCL)**
Ρήξη Έξω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (LCL)**.
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού (**ACL**).
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού (**PCL**).

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ "PLUSPOINT II"

Κωδικός	9445				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Βάρος σε γραμ.	614	629	649	666	681
Μήκος σε εκ.	40	40	40	40	40

Δεξιός - Αριστερός

- Κατασκευή από ελαφρύ κράμα αλουμινίου.
- Αφρώδεις αντιαλλεργικές επενδύσεις.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης "PLUSPOINT II" με ειδικά εξαρτήματα σε θέσεις Κάμψης: 0° - 20° - 30° - 45° - 75° - 90°, σε θέσεις Έκτασης: 0° - 10° - 20° - 30° - 40°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής. Πλάγια Αφρώδη Κονδυλικά **PADS**.
- Ιδανικός για μακρά χρήση.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Αποκατάσταση σε:
Ρήξη Έσω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (MCL)**
Ρήξη Έξω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (LCL)**.
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού (**ACL**).
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού (**PCL**).

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ "PLUSPOINT 3"

Κωδικός	9540				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Βάρος σε γραμ.	650	670	680	700	730
Μήκος σε εκ.	40	40	40	40	40

Δεξιός - Αριστερός

- Κατασκευή από ανθεκτικό διαμορφώσιμο κράμα αλουμινίου (**ALLOY**).
- Αφρώδεις αντιαλλεργικές επενδύσεις από πολυέστερ 13%, ελαστικές ίνες 10%, πολυουρεθάνη 18%, νάυλον 59%, με βελούδινη επένδυση που μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί αντιολισθητικοί ιμάντες από πολυμερές ελαστικό.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης λεπτού πάχους "**PLUSPOINT 3**" σε θέσεις Κάμψης: 45° - 60° - 75° - 90°.
σε θέσεις Έκτασης: 0° - 10° - 20° - 30° - 40°.
Κλειδώνουν σε θέσεις: 0° - 10° - 20° - 30°.
- Πλάγια αφρώδη Κονδυλικά **PADS**.
- Ιδανικός για μακρά χρήση.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Αποκατάσταση σε:
Ρήξη Έσω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (MCL)**
Ρήξη Έξω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (LCL)**
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού (**ACL**).
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού (**PCL**).

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ "PLUSPOINT 4"

Κωδικός	33040				
Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Μήκος σε εκ.	40	40	40	40	40

Δεξιός - Αριστερός

- Κατασκευή από ανθεκτικό διαμορφώσιμο κράμα αλουμινίου (ALLOY).
- Αφρώδεις αντιαλλεργικές επενδύσεις από πολυέστερ 13%, ελαστικές ίνες 10%, πολυουρεθάνη 18%, νάυλον 59%, με βελούδινη επένδυση που μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί αντιολισθητικοί ιμάντες από πολυμερές ελαστικό.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης λεπτού πάχους "PLUSPOINT 4" σε θέσεις Κάμψης: 45° - 60° - 75° - 90°.
σε θέσεις Έκτασης: 0° - 10° - 20° - 30° - 40°.
Κλειδώνουν σε θέσεις: 0° - 10° - 20° - 30°.
- Πλάγια αφρώδη Κονδυλικά **PADS**.
- Ιδανικός για μακρά χρήση.

New



ΠΟΛΥΚΕΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ "PLUSPOINT 4" ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΜΨΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Αποκατάσταση σε:
Ρήξη Έσω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (MCL)**
Ρήξη Έξω Πλάγιου Συνδέσμου **GRADE III (LCL)**.
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού (**ACL**).
Συνδεσμοπλαστική Σε Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού (**PCL**).



**ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ
"GO UP COOL PCL"**

Κωδικός	GO UP COOL PCL
Μέγεθος	Κοινό
Μήκος σε εκ.	56

- Διαθέτει υφασμάτινα τεμάχια **FOAM** από πολυεστέρα και πολυουρεθάνη, Μηρού και Κνήμης, αεριζόμενα, αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά, μη τοξικά. Μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι αντιολισθητικοί ιμάντες μεγάλου μήκους από νάυλον με επένδυση από πολυαμίδη.
- Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες από κράμα αλουμινίου.
- Λεπτού πάχους πολυκεντρικοί μηχανισμοί **"GO UP"** σε θέσεις: Κάμψης από 0° έως 120° μοίρες με επαύξηση ανά 10° μοίρες. Έκτασης από 0° έως 60° μοίρες με επαύξηση ανά 10° μοίρες.
Διαθέτει θέση Υπερέκτασης -10° μοιρών.
Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης.
Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**.
- Διαθέτει οπίσθιους αεροθαλάμους προσαφαίρεσης εισαγωγής εξαγωγής αέρος με ειδική αντλία **"PUMP"** που προκαλούν πρόσθια Ολίσθηση της Κνήμης επί του Μηρού σε θέσεις επιλογής.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Αποκατάσταση σε: Συνδεσμοπλαστική Οπισθίου Χιαστού Συνδέσμου (PCL).

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ ΓΟΝΑΤΟΣ "UNLOADER SPIRIT"

Κωδικός	UNLOADER SPIRIT				
Μέγεθος	XS	S	M	L	XL
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	34/39	39/44	44/52	52/60	60/67
Μέλος	Δεξιό - Αριστερό				
ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ (VALGUS)	Θέση Πολυκεντρικού Μηχανισμού LATERAL (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)				
ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ (VARUS)	Θέση Πολυκεντρικού Μηχανισμού MEDIAL (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)				

Ο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ

- Πλαστικές κοιλότητες Μηρού - Κνήμης ανατομικής σχεδίασης.
- Διαθέτει προσθαφαιρούμενες με αυτοκόλλητο αφρώδεις επενδύσεις, αντιεφιδρωτικές, μαλακές, αντιαλλεργικές, μη τοξικές για μέγιστη άνεση.
- Τρεις σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες με αφρώδεις επενδύσεις.
- Διαθέτει δυναμικό περιστροφικό εργονομικό ιμάντα που ασκεί βαθμιαίες και ελκτικές δυνάμεις που προκαλούν διαχωρισμό και αποφόρτιση του Μεσαρθρίου διαστήματος.
- Διαθέτει διπλό μηριαίο - κνημιαίο μηχανισμό ρύθμισης με ειδικό κλειδί, Βλαιοσύτητας - Ραιβότηας με δυναμική δράση, κλειδωμά σε θέσεις επιλογής.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός που επιτρέπει την ελεύθερη Κάμψη - Έκταση του Γόνατος καθώς και ρύθμιση της Έκτασης σε θέσεις επιλογής: 5° - 10° - 15°. Ο πολυκεντρικός μηχανισμός διαθέτει Κονδυλικά αφρώδη PADS.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή και χρήση από τον ίδιο τον Ασθενή.
- Διόρθωση Βλαιοσύτητας - Ραιβότηας έως 15° παθολογικής γωνίωσης.
- Αποφορτίζει άμεσα την Πάσχουσα περιοχή.
- Βελτιώνει άμεσα το Άλγος.
- Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης περαιτέρω εκφύλισης.
- Εφαρμόζεται και κάτω από την ένδυση του Ασθενούς.
- Ιδανικός για μακρά χρονική θεραπευτική χρήση.



Χωρίς Νάρθηκοποίηση



Με Νάρθηκοποίηση

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε: Μονοδιαμερισματική Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος **GRADE III, IV**. Σύνδρομο Οστικού Οιδήματος Γόνατος "**BONE EDEMA SYNDROME**". Ιδιοπαθή Οστεονέκρωση Έσω Μηριαίου Κονδύλου Γόνατος "**SPONK**".


New



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

Κωδικός	ORTHO - A
Μέγεθος	Κοινό
Μέλος	Δεξιό - Αριστερό
ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ (VALGUS)	Ποδυκεντρικός Μηχανισμός ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ (VARUS)	Ποδυκεντρικός Μηχανισμός ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Ο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	
ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ	

- Πλαστικές κοιλότητες Μηρού - Κνήμης ανατομικής σχεδίασης.
- Διαθέτει προσθαφαιρούμενες με αυτοκόλλητο αφρώδεις επενδύσεις, αντιεφιδρωτικές, μαλακές, αντιαλλεργικές, μη τοξικές για μέγιστη άνεση, νάυλον 76%, πολυέστερ 10%, ελαστικές ίνες 14%.
- Τέσσερις σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες με αφρώδεις επενδύσεις, οι οποίοι διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.
- Διαθέτει μηριαίο μηχανισμό ρύθμισης με ειδικό κλειδί, **Βλαιοσότητας - Ραιβότητας με δυναμική δράση.**
- Πολυκεντρικός μηχανισμός που επιτρέπει την Κάμψη - Έκταση του Γόνατος
Ο πολυκεντρικός μηχανισμός διαθέτει Κονδυλικά αφρώδη **PADS**.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή και χρήση από τον ίδιο τον Ασθενή.
- Διόρθωση Βλαιοσότητας - Ραιβότητας έως 15° παθολογικής γωνίωσης.
- Αποφορτίζει άμεσα την Πάσχουσα περιοχή.
- Βελτιώνει άμεσα το Άλγος.
- Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης περαιτέρω εκφύλισης.
- Εφαρμόζεται και κάτω από την ένδυση του Ασθενούς.
- Ιδανικός για μακρά χρονική θεραπευτική χρήση.

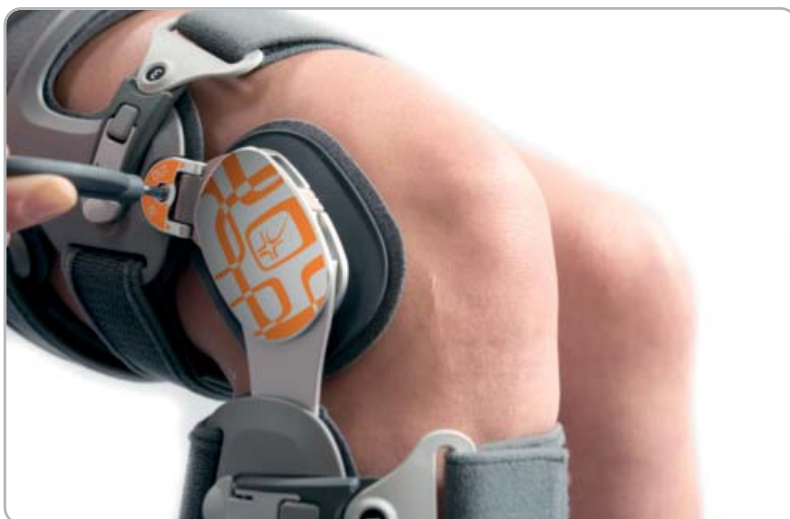

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Συντηρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε: Μονοδιαμερισματική Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος **GRADE III, IV**. Σύνδρομο Οστικού Οιδήματος Γόνατος **"BONE EDEMA SYNDROME"**. Ιδιοπαθή Οστεονέκρωση Έσω Μηριαίου Κονδύλου Γόνατος **"SPONK"**.

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ "IROM"

Κωδικός	IROM	
Μέγεθος	SHORT	LONG
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	57	66
Μήκος Κάτω Άκρου σε εκ.	Έως 80	Άνω 80


ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΥΠΟΥ COOL "IROM COOL"

Κωδικός	IROM COOL	
Μέγεθος	SHORT	LONG
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	57	66
Μήκος Κάτω Άκρου σε εκ.	Έως 80	Άνω 80

- Διαθέτει ύφασμα πολλαπλών στρωμάτων πολυουρεθάνης (**FOAM**) αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, αντιολισθητικό μη τοξικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Μπορεί να πλυθεί.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι αντιολισθητικοί ιμάντες.
- Πλάγιες ανατομικές μεταλλικές μπανέλες που υποστηρίζουν και διαμορφώνουν τη βλαιοσότητα - Ραιβότητα του Γόνατος.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί **"IROM"** σε θέσεις: Κάμψης από 0° έως 120°, με επαύξηση ανά 10°. Έκτασης από 0° έως 80°, με επαύξηση ανά 10°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**. Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.
- Ο Νάρθηκας διαθέτει ειδικές εγκοπές Μηριαίες και Κνημιαίες οι οποίες κόβονται εύκολα και το μήκος του Νάρθηκα μειώνεται κατά 6 εκ. και 12 εκ.

**IROM****IROM COOL**

Πολυκεντρικός Μηχανισμός ρύθμισης IROM.

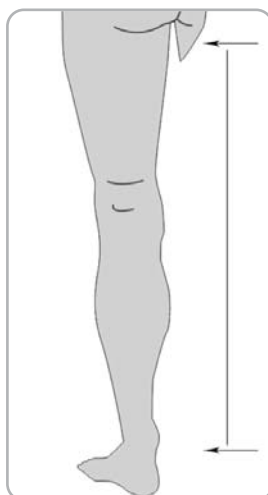

Μήκος κάτω Άκρου Συφυρό - Βουβώνας.

Ενδείξεις: Ιδανικοί για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχilioπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθυνση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα **"AO/OTA TYPE AII, AIII"**.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "IROM TELESCOPIC"



Κωδικός	IROM TELESCOPIC	
Μέγεθος	STANDARD	XL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	Έως 66	66/80
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	48/63,5	48/63,5

- Διαθέτει ύφασμα πολλαπλών στρωμάτων πολυουρεθάνης (FOAM) αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, αντιολισθητικό μη τοξικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Μπορεί να πλυθεί.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι αντιολισθητικοί ιμάντες.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί "IROM" σε θέσεις: Κάμψης από 0° έως 120°, με επαύξηση ανά 10°. Έκτασης από 0° έως 80°, με επαύξηση ανά 10°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά PADS. Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.
- Σύστημα αυξομείωσης μήκους του Νάρθηκα Μηριαία και Κνημιαία με τηλεσκοπικό μηχανισμό "TELE - FIT" με δέκα (10) θέσεις επιλογής, από 48 εκ. Έως και 63,5.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (PTRR), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (BPTTR). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (MPFL) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχίλοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθυνση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (TIBIAL PLATEAU). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα "AO/OTA TYPE AII, AIII".

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "IROM TELESCOPIC COOL"

Κωδικός	IROM TELESCOPIC COOL	
Μέγεθος	STANDARD	XL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	Έως 66	66/80
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	48/63,5	48/63,5

- Διαθέτει υφασμάτινα τεμάχια πολυουρεθάνης (**FOAM**), αεριζόμενα, αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά, αντιολισθητικά, μη τοξικά, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι αντιολισθητικοί ιμάντες.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί **"IROM"** σε θέσεις: Κάμψης από 0° έως 120°, με επαύξηση ανά 10°. Έκτασης από 0° έως 80°, με επαύξηση ανά 10°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**. Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.
- Σύστημα αυξομείωσης μήκους του Νάρθηκα Μηριαία και Κνημιαία με τηλεσκοπικό μηχανισμό **"TELE - FIT"** με δέκα (10) θέσεις επιλογής, από 48 εκ. Έως και 63,5.
- Δυνατότητα εφαρμογής επιθεμάτων θέρμο - κρυοθεραπείας.
- Για Ασθενείς που δεν επιδέχονται υφασμάτινες επενδύσεις λόγω επιφανειακών Τραυματισμών και Συρραφών.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλο Οίδημα στο Γόνατο.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλη Μυϊκή ατροφία.
- Για Ασθενείς που χρήζουν μακράς χρονικής Αποθεραπείας.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχιλοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθυνση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα **"ΑΟ/ΟΤΑ TYPE AII, AIII"**.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "TROM ADVANCE"



Κωδικός	TROM ADVANCE	
Μέγεθος	STANDARD	XL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	Έως 66	66/80
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	45,5/58,5	45,5/58,5

- Διαθέτει ύφασμα πολλαπλών στρωμάτων πολυουρεθάνης (FOAM) αεριζόμενο, αντιφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, αντιολισθητικό μη τοξικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Μπορεί να πλυθεί.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι αντιολισθητικοί ιμάντες μεγάλου μήκους και πλάτους 5 εκ. Επενδεδυμένοι με σιλκόνη "SILI - GRIP". Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί "TROM ADVANCE" σε θέσεις: Κάμψης: 30° - 40° - 70° - 90° - FULL. Έκτασης: -10° - 0° - 10° - 30°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτει πλήθος Λειτουργικών Πρωτοκόλλων "QUICK SYSTEM": από Υπερέκταση -10° έως Κάμψη 90° με επαύξηση ανά 10°. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά PADS.
- Σύστημα αυξομείωσης μήκους του Νάρθηκα Μηριαία και Κνημιαία με τηλεσκοπικό μηχανισμό "TELE - FIT" με δέκα (10) θέσεις επιλογής από 45,5 εκ. έως και 58,5 εκ.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (PTRR), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (BPTRR). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (MPFL) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχίλοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθυνση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (TIBIAL PLATEAU). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα "AO/OTA TYPE AII, AIII".

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "TROM ADVANCE COOL"

Κωδικός	TROM ADVANCE COOL	
Μέγεθος	STANDARD	XL
Περιφ. Μηρού σε εκ.	Έως 66	66/80
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	45,5/58,5	45,5/58,5

- Διαθέτει υφασμάτινα τεμάχια πολυουρεθάνης (**FOAM**), αεριζόμενα, αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά, αντιολισθητικά, μη τοξικά, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι αντιολισθητικοί ιμάντες μεγάλου μήκους και πλάτους 5 εκ. Επενδεδυμένοι με σιλίκονη "**SILI - GRIP**". Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί "**TROM ADVANCE**" σε θέσεις: Κάμψης: 30° - 40° - 70° - 90° - FULL. Έκτασης: -10° - 0° - 10° - 30°. Διαθέτει πλήθος Λειτουργικών Πρωτοκόλλων "**QUICK SYSTEM**": από Υπερέκταση -10° έως Κάμψη 90° με επαύξηση ανά 10°. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**.
- Σύστημα αυξομείωσης μήκους του Νάρθηκα Μηριαία και Κνημιαία με τηλεσκοπικό μηχανισμό "**TELE - FIT**" με δέκα (10) θέσεις επιλογής από 45,5 εκ. έως και 58,5 εκ.
- Για Ασθενείς που δεν επιδέχονται υφασμάτινες επενδύσεις λόγω επιφανειακών Τραυματισμών και Συρραφών.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλο Οίδημα στο Γόνατο.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλη Μυϊκή ατροφία.
- Για Ασθενείς που χρήζουν μακράς χρονικής Αποθεραπείας.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχιλοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περώνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθυνση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα "**ΑΟ/ΟΤΑ TYPE AII, AIII**".

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "X - ACT ROM"



Κωδικός	X - ACT ROM
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	Έως 71
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	Από 48 Έως 63,5
Βάρος σε γραμ.	935

- Διαθέτει υφασμάτινα τεμάχια πολυουρεθάνης (**FOAM**), αεριζόμενα, αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά, αντιολισθητικά, μη τοξικά, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι αντιολισθητικοί ιμάντες μεγάλου μεγέθους. Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί αλουμινίου "**X - ACT ROM**" σε θέσεις: Κάμψης από -10° έως 120° με επαύξηση ανά 10° . Έκτασης από -10° έως 120° με επαύξηση ανά 10° . Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**.
- Σύστημα αυξομείωσης του μήκους του Νάρθηκα Μηριαία και Κνημιαία με τηλεσκοπικό μηχανισμό "**TELE - FIT**" με οκτώ (8) θέσεις επιλογής από 48 εκ. έως και 63,5 εκ.
- Σύστημα "**QUICK LOCK**" αυτόματης Κάμψης - Έκτασης του Νάρθηκα σε θέσεις επιλογής: 0° - 15° - 30° .
- Για Ασθενείς που δεν επιδέχονται υφασμάτινες επενδύσεις λόγω επιφανειακών Τραυματισμών και Συρραφών.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχιλοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθυνση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα "**AO/OTA TYPE AII, AIII**".

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "X - ACT ROM LITE"

Κωδικός	X - ACT ROM LITE
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	Έως 76
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	Από 46 Έως 65
Βάρος σε γραμ.	806

- Διαθέτει υφασμάτινα τεμάχια πολυουρεθάνης (FOAM), αεριζόμενα, αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά, αντιολισθητικά, μη τοξικά, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι αντιολισθητικοί ιμάντες.
- Πλάγιες ανατομικές μεταλλικές μπανέλες που υποστηρίζουν και διαμορφώνουν τη βλαισότητα - Ραιβότητα του Γόνατος.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί αλουμινίου "X - ACT ROM" σε θέσεις: Κάμψης από -10° έως 120° με επαύξηση ανά 10°. Έκτασης από -10° έως 120° με επαύξηση ανά 10°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά PADS.
- Σύστημα αυξομείωσης του μήκους του Νάρθηκα Μηριαία και Κνημιαία με τηλεσκοπικό μηχανισμό "TELE - FIT" με οκτώ (8) θέσεις επιλογής από 46 εκ. έως και 65 εκ.
- Σύστημα "QUICK LOCK" αυτόματης Κάμψης - Έκτασης του Νάρθηκα σε θέσεις επιλογής: 0° - 15° - 30°.
- Δυνατότητα εφαρμογής επιθεμάτων Θέρμο - κρυοθεραπείας.
- Για Ασθενείς που δεν επιδέχονται υφασμάτινες επενδύσεις λόγω επιφανειακών Τραυματισμών και Συρραφών.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλο Οίδημα στο Γόνατο.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλη Μυϊκή ατροφία.
- Για Ασθενείς που χρήζουν μακράς χρονικής Αποθεραπείας.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:


Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (PTRR), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (BPTRR). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (MPFL) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχιλιοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθιση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (TIBIAL PLATEAU). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα "ΑΟ/ΟΤΑ TYPE AII, AIII".



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "RANGER II"

Κωδικός	94230
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	Έως 91
Μήκος Κάτω Άκρου σε εκ.	Έως 81
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	43

- Διαθέτει ύφασμα **FOAM** αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, μη τοξικό αντιεφιδρωτικό, το οποίο μπορεί να πλυθεί.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες αυτοκόλλητης εφαρμογής.
- Τέσσερις αυτοκόλλητες σκληρές πλαστικές βαλβίδες.
- Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες που συνδέονται με το **FOAM**.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης "**RANGER II**" σε θέσεις Κάμψης - Έκτασης: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας. Πλάγια Αφρώδη Κονδυλικά **PADS**.

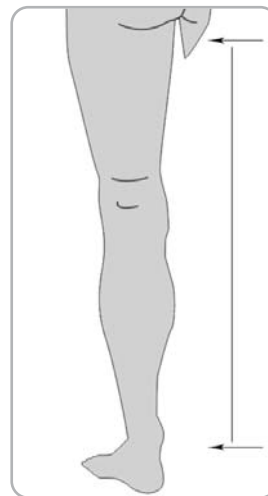

Μήκος κάτω Άκρου
Σφυρό - Βουβώνας.




Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχιοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθιση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα "**AO/OTA TYPE AII, AIII**".

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "RANGER II"

Κωδικός	94240
Μέγεθος	Κοινό
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	Έως 91
Μήκος Κάτω Άκρου σε εκ.	Άνω 81
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	66

- Διαθέτει ύφασμα **FOAM** αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, μη τοξικό αντιεφιδρωτικό, το οποίο μπορεί να πλυθεί.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες αυτοκόλλητης εφαρμογής.
- Τέσσερις αυτοκόλλητες σκληρές πλαστικές βαλβίδες.
- Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες που συνδέονται με το **FOAM**.
- Ο Νάρθηκας διαθέτει ειδικές εγκοπές Μηριαίες - Κνημιαίες οι οποίες κόβονται εύκολα και το μήκος του Νάρθηκα μειώνεται από 66 εκ. σε 56 εκ. και σε 46 εκ.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης "RANGER II" σε θέσεις Κάμψης - Έκτασης: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας. Πλάγια Αφρώδη Κονδυλικά **PADS**.

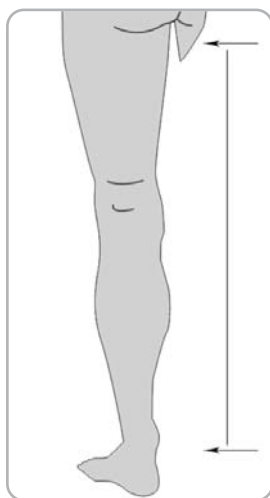

Μήκος κάτω Άκρου
Σφυρό - Βουβώνας.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:


Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχίλιοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθιση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα "AO/OTA TYPE AII, AIII".



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "GO UP"

Κωδικός	GO UP	
Μέγεθος	REGULAR	LONG
Μήκος Κάτω Άκρου σε εκ.	Έως 81	Άνω 81
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	55	65

- Διαθέτει ύφασμα **FOAM** αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό. Μπορεί να πλυθεί.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες μεγάλου μεγέθους.
- Μεταλλικές μπανέλες που συνδέονται αυτοκόλλητα με **FOAM**.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί **"GO - UP"** σε θέσεις: Κάμψης από 0° έως 120°, Έκτασης από 0° έως 60° Με επαύξηση ανά 10°. **Διαθέτει θέση Υπερέκτασης -10°**. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**. Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.

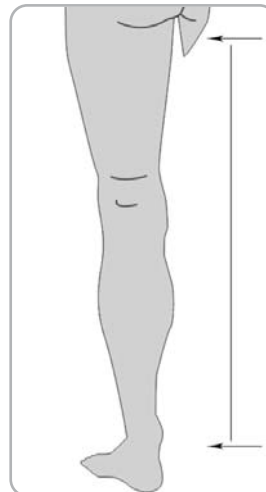

Μήκος κάτω Άκρου
Σφυρό - Βουβώνας.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχιλοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθιση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα **"ΑΟ/ΟΤΑ TYPE AII, AIII"**.

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "GO UP COOL"

Κωδικός	GO UP COOL	
Μέγεθος	REGULAR	LONG
Μήκος Κάτω Άκρου σε εκ.	Έως 81	Άνω 81
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	55	65

- Διαθέτει υφασμάτινα τεμάχια **FOAM** Μηρού και Κνήμης, αεριζόμενα, αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά, μη τοξικά. Μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες μεγάλου μεγέθους.
- Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες που συνδέονται αυτοκόλλητα με τα **FOAM**.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί **"GO UP"** σε θέσεις:
Κάμψης από 0° έως 120° μοίρες με επαύξηση ανά 10° μοίρες.
Έκτασης από 0° έως 60° μοίρες με επαύξηση ανά 10° μοίρες.
Διαθέτει θέση Υπερέκτασης -10° μοιρών.
Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης.
Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**.
- Ο Νάρθηκας **GO UP COOL REGULAR** διαθέτει ειδικές εγκοπές Μηριαίες - Κνημιαίες οι οποίες κόβονται εύκολα και το μήκος του Νάρθηκα μειώνεται από 55 εκ. σε 45 εκ.
- Ο Νάρθηκας **GO UP COOL LONG** διαθέτει ειδικές εγκοπές Μηριαίες - Κνημιαίες οι οποίες κόβονται εύκολα και το μήκος του Νάρθηκα μειώνεται από 65 εκ. σε 55 εκ. και σε 45 εκ.
- Δυνατότητα εφαρμογής επιθεμάτων θέρμο - κρυοθεραπείας.
- Για Ασθενείς που δεν επιδέχονται ολοκληρωμένες υφασμάτινες επενδύσεις λόγω επιφανειακών Τραυματισμών και Συρραφών.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλο Οίδημα στο Γόνατο.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλη Μυϊκή ατροφία.
- Για Ασθενείς που χρήζουν μακράς χρονικής Αποθεραπείας.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:


Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχίλιοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθιση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα **"AO/OTA TYPE AII, AIII"**.



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "REGAIN"

Κωδικός	95000	95050
Μέγεθος	Κοινό	Κοινό
Μήκος Κάτω Άκρου σε εκ.	Έως 81	Άνω 81
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	55	65

- Διαθέτει ύφασμα πολλαπλών στρωμάτων **FOAM** Μηρού και Κνήμης αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό. Μπορεί να πλυθεί.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες μεγάλου μεγέθους.
- Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες που συνδέονται αυτοκόλλητα με το **FOAM**.
- Τέσσερις αυτοκόλλητες σταθεροποιητικές πλαστικές βαλβίδες.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί **"REGAIN"** σε θέσεις:
Κάμψης από 0° έως 120°. Με επαύξηση ανά 10°.
Έκτασης από 0° έως 60°. Με επαύξηση ανά 10°.
Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης.
Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**.

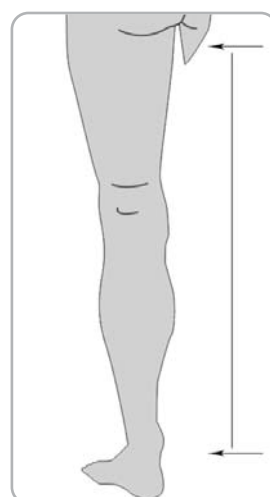

Μήκος κάτω Άκρου
Σφυρό - Βουβώνας.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα.
Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**).
Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχλιοπλαστική.
Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος.
Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθιση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**).
Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα **"AO/OTA TYPE AII, AIII"**.

**ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ
"REGAIN COOL"**
Κωδικός 95075
Μέγεθος Κοινό
Μήκος Νάρθηκα σε εκ. 51

- Διαθέτει υφασμάτινα τεμάχια **FOAM** Μηρού και Κνήμης, αεριζόμενα, αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά, μη τοξικά. Μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες μεγάλου μεγέθους.
- Μεταλλικές μπανέλες που συνδέονται αυτοκόλλητα με **FOAM**.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί **"REGAIN"** σε θέσεις: Κάμψης από 0° έως 120°. Με επαύξηση ανά 10°. Έκτασης από 0° έως 60°. Με επαύξηση ανά 10°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**.
- Δυνατότητα εφαρμογής **επιθεμάτων θέρμο - κρυοθεραπείας**.
- Για Ασθενείς που δεν επιδέχονται ολοκληρωμένες υφασμάτινες επενδύσεις λόγω επιφανειακών Τραυματισμών και Συρραφών.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλο Οίδημα στο Γόνατο.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλη Μυϊκή ατροφία.
- Για Ασθενείς που χρήζουν μακράς χρονικής Αποθεραπείας.


Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχίλοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθυνση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα **"AO/OTA TYPE AII, AIII"**.



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "PREMIUM"

Κωδικός	PREMIUM
Μέγεθος	REGULAR
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	Έως 69
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	61

- Διαθέτει ύφασμα πολλαπλών στρωμάτων **FOAM** αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό. Μπορεί να πλυθεί.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες μεγάλου μεγέθους.
- Μεταλλικές μπανέλες που συνδέονται αυτοκόλλητα με το **FOAM**.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί **"PREMIUM"** σε θέσεις:
Κάμψης: 0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90° - 105° - 120°,
Έκτασης: 0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**.
- Ο Νάρθηκας διαθέτει ειδικές εγχοπές Μηριαίες - Κνημιαίες οι οποίες κόβονται εύκολα και το μήκος του Νάρθηκα μειώνεται από 61 εκ. σε 51 εκ. και σε 41 εκ.




Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχιλοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθιση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα **"ΑΟ/ΟΤΑ TYPE AII, AIII"**.

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "PREMIUM COOL"

Κωδικός	PREMIUM COOL
Μέγεθος	REGULAR
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	Έως 69
Μήκος Νάρθηκα σε εκ.	61

- Διαθέτει υφασμάτινα τεμάχια **FOAM** Μηρού και Κνήμης, αεριζόμενα, αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά, μη τοξικά. Μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες μεγάλου μεγέθους.
- Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες που συνδέονται αυτοκόλλητα με τα **FOAM**.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί **"PREMIUM"** σε θέσεις:
Κάμψης: 0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90° - 105° - 120°,
Έκτασης: 0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90°.
Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης.
Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια κονδυλικά **PADS**.
- **Ο Νάρθηκας διαθέτει ειδικές εγχοπές Μηριαίες - Κνημιαίες οι οποίες κόβονται εύκολα και το μήκος του Νάρθηκα μειώνεται από 61 εκ. σε 51 εκ. και σε 41 εκ.**
- Δυνατότητα εφαρμογής επιθεμάτων θέρμο - κρυοθεραπείας.
- Για Ασθενείς που δεν επιδέχονται ολοκληρωμένες υφασμάτινες επενδύσεις λόγω επιφανειακών Τραυματισμών και Συρραφών.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλο Οίδημα στο Γόνατο.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλη Μυϊκή ατροφία.
- Για Ασθενείς που χρήζουν μακράς χρονικής Αποθεραπείας.

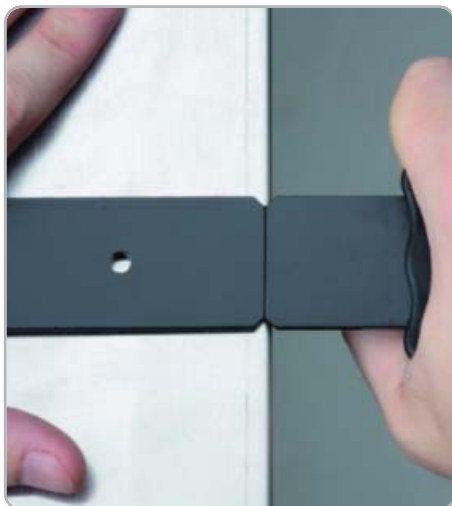

Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχίλιοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθιση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα **"AO/OTA TYPE AII, AIII"**.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "INNOVATOR DLX"



Κωδικός	INNOVATOR DLX
Μέγεθος	REGULAR
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	Έως 69
Μήκος Ρυθμιζόμενο σε εκ.	Από 43 Έως 72

- Διαθέτει ύφασμα πολλαπλών στρωμάτων **FOAM** αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες μεγάλου μήκους. Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.
- Μπανέλες που συνδέονται αυτοκόλλητα με **FOAM**.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί "**INNOVATOR**" σε θέσεις: Κάμψης από 0° έως 120°, με επαύξηση ανά 10°. Έκτασης από 0° έως 80°, με επαύξηση ανά 10°. **Διαθέτει θέση Υπερέκτασης -10°**. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**.
- Σύστημα αυξομείωσης του μήκους του Νάρθηκα Μηριαία και Κνημιαία με τηλεσκοπικό μηχανισμό με 19 θέσεις επιλογής από 43 εκ. έως και 72 εκ.
- Διαθέτει σύστημα "**DROP LOCK**", αυτόματης Κάμψης - Έκτασης του Νάρθηκα σε θέσεις επιλογής: 0° - 15° - 30° - 45°.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχιλοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθιση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα "**AO/OTA TYPE AII, AIII**".

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "INNOVATOR DLX COOL"

Κωδικός	INNOVATOR DLX COOL
Μέγεθος	REGULAR
Περιφέρεια Μηρού σε εκ.	Έως 69
Μήκος Ρυθμιζόμενο σε εκ.	Από 43 Έως 72

- Διαθέτει υφασμάτινα τεμάχια **FOAM** Μηρού και Κνήμης, αεριζόμενα, αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά, μη τοξικά.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες μεγάλου μήκους. Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.
- Μπανέλες που συνδέονται αυτοκόλλητα με **FOAM**.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί "**INNOVATOR**" σε θέσεις: Κάμψης από 0° έως 120°, με επαύξηση ανά 10°. Έκτασης από 0° έως 80°, με επαύξηση ανά 10°. **Διαθέτει θέση Υπερέκτασης -10°**. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **PADS**.
- Σύστημα αυξομείωσης του μήκους του Νάρθηκα Μηριαία και Κνημιαία με τηλεσκοπικό μηχανισμό με 19 θέσεις επιλογής από 43 εκ. έως και 72 εκ.
- Διαθέτει σύστημα "**DROP LOCK**", αυτόματης Κάμψης - Έκτασης του Νάρθηκα σε θέσεις επιλογής: 0° - 15° - 30° - 45°.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχίλιοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθιση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα "**AO/OTA TYPE AII, AIII**".

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ
"TELE ROM KNEE COOL"

Κωδικός TELE ROM KNEE COOL

Μέγεθος Κοινό

Μήκος Ρυθμιζόμενο σε εκ. Από 55 Έως 72

- Διαθέτει υφασμάτινα τεμάχια **FOAM** Μηρού και Κνήμης από πολυουρεθάνη, αεριζόμενα, αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά, μη τοξικά. Μπορούν να πλυθούν.
- Σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες μεγάλου μεγέθους από νάυλον 100%. Διαθέτουν πλαστικά κλείστρα ασφαλείας.
- Πλάγιες μπανέλες αλουμινίου που συνδέονται αυτοκόλλητα με τα **FOAM**.
- Πολυκεντρικοί μηχανισμοί **"TELE ROM"** σε θέσεις Κάμψης: 0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90° - 105° - 120°, Έκτασης: 0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90°. Κλειδώνουν σε θέσεις επιλογής, χωρίς κλειδί ρύθμισης. Οι πολυκεντρικοί μηχανισμοί είναι επικαλυμμένοι από πολυεστερικές υαλό-ίνες τύπου **"FIBERGLASS"** και νάυλον 100%. Διαθέτουν αφρώδη αυτοκόλλητα πλάγια Κονδυλικά **"PADS"**.
- Σύστημα αυξομείωσης μήκους του Νάρθηκα Μηριαία και Κνημιαία με τηλεσκοπικό μηχανισμό **"TELESCOPIC"** με 08 θέσεις επιλογής από 55 εκ. έως και 72 εκ.
- Διαθέτει σύστημα **"DROP LOCK"**, αυτόματης Κάμψης - Έκτασης του Νάρθηκα σε θέσεις επιλογής: 0° - 15° - 20° - 30° - 45°.
- Δυνατότητα εφαρμογής επιθεμάτων θέρμο - κρυοθεραπείας.
- Για Ασθενείς που δεν επιδέχονται ολοκληρωμένες υφασμάτινες επενδύσεις λόγω επιφανειακών Τραυματισμών και Συρραφών.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλο Οίδημα στο Γόνατο.
- Για Ασθενείς που εμφανίζουν μεγάλη Μυϊκή Ατροφία.
- Για Ασθενείς που χρήζουν μακράς χρονικής Αποθεραπείας.



Ενδείξεις: Ιδανικός για τη Μετεγχειρητική Θεραπευτική Αποκατάσταση σε:

Ολική Επιγονατιδεκτομή Τένοντα Σε Συντριπτικά Κατάγματα Επιγονατίδος - Συρραφή Σε Ολική Ρήξη Τετρακέφαλου Τένοντα. Συρραφή Σε Οξεία Ετερόπλευρη Μερική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**PTRR**), Ολική Ρήξη Επιγονατιδικού Τένοντα (**BPTRR**). Ανακατασκευή Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου (**MPFL**) και Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου Με Τροχιλιοπλαστική. Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Κεφαλής Περόνης - Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Κάταγμα Επιγονατίδος. Οστεοσύνθεση Σε Κάταγμα Συμπίεστικό, Σφηνοειδές, με Εμβύθιση, Αμφικονδύλιο Κνημιαίου Κονδύλου (**TIBIAL PLATEAU**). Οστεοσύνθεση Σε Παρεκτοπισμένο Υπερκονδύλιο Κάταγμα, Διακονδύλιο Κάταγμα **"AO/OTA TYPE AII, AIII"**.

